

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭРХПГ

V-система превзойдет Ваши ожидания




V-СИСТЕМА


V-система, в которую входит дуоденоскоп EVIS EXERA II TJF-Q180V с его уникальным механизмом двойного блокирования, обеспечивает максимальную надежность и адаптивность при ЭРХПГ.

Механизм двойного блокирования

Благодаря усовершенствованному V-образному желобу центральный механизм блокирования позволяет быстро и надежно зафиксировать 0,035 и 0,025 дюймовые проводники. Новый боковой механизм увеличивает число событий, в которых может быть достигнута сохранность проводника.

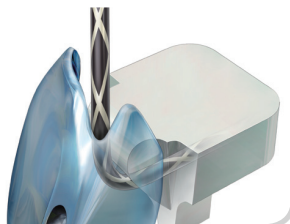

Центральный фиксатор: проводник фиксируется за счет своей силы противодействия

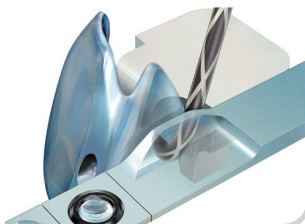

Боковой фиксатор: проводник зажимается физическим усилием

Выбор метода

Полная комплектация инструментов V-системы поддерживает системы длинных и коротких проводников.

Универсальный ассортимент удобных инструментов

Современные инструменты для эндоскопических вмешательств с эргономичными ручками. Полный ассортимент современных инструментов для ЭРХПГ, совместимых с V-системой.

Надежная фиксация

Прочное крепление проводника элеватором на дистальном конце V-эндоскопа OLYMPUS при смене инструмента.




TJF-Q180V с превосходным качеством изображения

V-SYSTEM

ПРОВОДНИК VISIGLIDE

Принципиально новая конструкция проводника для повышения эффективности процедуры ЭРХПГ

Одноразовый проводник VisiGlide для ЭРХПГ, разработанный совместно с компанией Terumo, выгодно отличается от конкурирующих изделий благодаря новой концепции проволочного проводника диаметром 0,025 дюйма: он имеет мягкий и очень гибкий кончик в сочетании с оптимальной жесткостью стержня, что упрощает смену инструментов. Теперь в одном проволочном проводнике собраны все достоинства: уникальная структура для точной щадящей канюляции, прекрасная маневренность для прохождения извилистых структур и улучшенной навигации, прекрасная рентгеноконтрастность и оптимальная жесткость для уверенной смены инструментов.

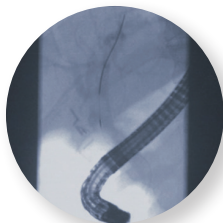

Превосходная
рентгеноконтрастность



Четкая видимость на
эндоскопической картинке



VisiGlide

ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ/ДОСТУП В ПРОТОКИ

BrushMaster V

Цитологическая щетка с уникальной конструкцией дистального конца

- Уникальная конструкция с возможностью присоединения проводника к дистальному концу щетки для более плавного ввода в целевую зону
- Двойные рентгеноконтрастные маркеры
- Функция зажатия щетки



Присоединение проводника к дистальному концу щетки



NEW


CleverCut 2V CleverCut 3V

Двух- и трехпросветные сфинктеротомы с покрытием CleverCut

- Инновационное покрытие CleverCut для безопасности при выполнении манипуляций
- Изогнутая форма инструмента
- Стабильное положение режущей струны для удобного распложения ножа
- Отдельные отверстия для впрыска, проводника и режущей струны



Покрытие CleverCut

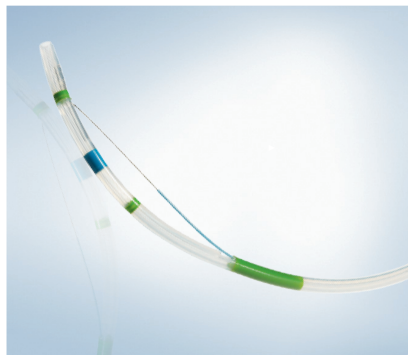


ДОСТУП В ПРОТОКИ


NeedleCut 3 V

Трехпросветные игольчатые ножи с покрытием CleverCut

- Уникальный безопасный механизм предотвращает глубокое проникновение
- Раздельные отверстия для впрыска, проводника и режущей струны
- Предварительно изогнутый конический наконечник

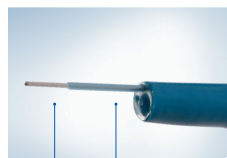

Режущая
часть
Покрытие CleverCut

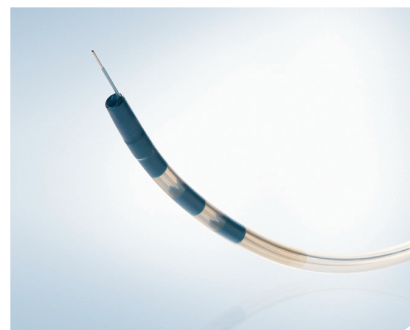

MaxPass

Баллонная дилатация высокого давления билиарной зоны-12ATM

- Для раздувания/сдувания баллонов для дилатации MaxPass
- Низкий профиль для легкого введения
- Встроенный манометр для точного контроля



Одноразовое устройство
для раздувания баллонов
для дилатации MaxPass



ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАМНЕЙ

FlowerBasket V TetraCatch V

Одноразовые корзинки для надежного извлечения камней

- FlowerBasket V: уникальная 8ми-проволочная конструкция для маленьких камней
- TetraCatch V: 4х-проволочная конструкция
- Вращающаяся версия облегчает захват камней
- Проводниковая версия облегчает проход за камень



LithoCrush V

Мощный и гибкий литотриптор

- Доступна вращающаяся модель корзинки
- Доступна проводниковая модель, облегчающая проход через камень
- Удобный дизайн ручки с трещоткой предотвращает потерю натяжения на камне



Multi-3 V Plus

Подходит для дистальных и широких проводников

- Один баллон – три разных размера
- Дополнительный размер баллонов 20 мм, диаметр раздувания для расширенных протоков
- Превосходная прочность увеличенных баллона
- Дренаж



Совместим с проводником
в дистальной части

СТЕНТИРОВАНИЕ

X-Suit NIR

NEW

Металлический непокрытый билиарный стент

- Уникальная конструкция ячеек XNIR для оптимального прилегания к стенкам
- Превосходная радиальная поддержка
- Отсутствие миграции ячеек
- Стабильно раскрывается от начала и до конца



Дизайн клеток NIRflex




QuickPlace V

NEW

Полный спектр продуктовой линейки пластиковых стентов

- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
- Конический дизайн дистального конца облегчает ввод в желчный проток
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Предзаряженный стент – готов к использованию

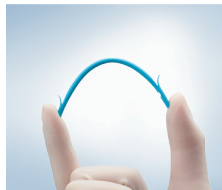

Обозначение	Артикул	Количество	Мин. диаметр рабочего канала Ø	Рабочая длина	Размеры баллона	Место инъекции
G-240-3527S	N3622530	1	0.035"	2700 mm	70 mm	прямой дистальный конец
G-240-3527A	N3622630	1			70 mm	изогнутый дистальный конец
G-240-3545S	N3622730	1		4500 mm	70 mm	прямой дистальный конец
G-240-3545A	N3622830	1			70 mm	изогнутый дистальный конец
G-240-2527S	N3622130	1	0.025"	2700 mm	70 mm	прямой дистальный конец
G-240-2527A	N3622230	1			70 mm	изогнутый дистальный конец
G-240-2545S	N3622330	1		4500 mm	70 mm	прямой дистальный конец
G-240-2545A	N3622430	1			70 mm	изогнутый дистальный конец

Непокрытый билиарный стент X-Suit NIR

X-Suit NIR

Обозначение	Артикул	Количество	Внешний диаметр стента	Длина стента	Установочный катетер	Минимальный диаметр рабочего канала	Рабочая длина
SME-200P-08040	N3502930	1	8 mm	40 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-200P-08060	N3503030	1		60 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-200P-08080	N3503130	1		80 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-200P-08100	N3503230	1		100 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-200P-10040	N3502530	1	10 mm	40 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-200P-10060	N3502630	1		60 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-200P-10080	N3502730	1		80 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-200P-10100	N3502830	1		100 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm

Покрытый билиарный стент X-Suit NIR

SME-210P-08060	N4454830	1	8 mm	60 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-210P-08080	N4454930	1		80 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-210P-10040	N4455030	1		40 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-210P-10060	N4455130	1	10 mm	60 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm
SME-210P-10080	N4455230	1		80 mm	7.5 Fr	3.2 mm	1900 mm

По вопросам приобретения инструмента
Вы можете обратиться к представителям
в Вашем регионе:

Россия:
– Москва +7 916 757 88 61
– МО и ЦФО +7 916 757 88 74
– Санкт-Петербург и СЗФО +7 981 833 18 68
– ПФО +7 910 108 00 68
– УФО +7 912 659 37 77
– СФО +7 913 793 62 62
– ДФО +7 913 793 62 62

– ЮФО + 7 988 369 97 85
– СКФО + 7 988 369 97 85

Украина: + 380 50 440 55 35
Казахстан: +7 702 741 05 16
Страны СНГ: + 380 44 594 48 01
Также к Вашим услугам телефон горячей
линии, звонок бесплатный:

Россия 8 800 200 12 18
Украина 0 800 50 12 18
Казахстан 8 800 200 12 18

По вопросам обучения методике,
пожалуйста, обращайтесь по телефону:
+7 495 735 45 78 доб 1205
или по телефонам горячей линии.